

生产产品开发和规模升级的数据处理所不可欠缺的各种研究室用搅拌装置。
新产品开发的第一步从这里开始。

LR

台式高速均质搅拌机



LR-1F



LR-2C

各种更换桨叶



特征

高速桨叶旋转所产生强力的剪切力、冲击力、乱流，可以在短时间内实现乳化、微粒化、均一分散。

只需旋转变速volume按钮即可自由调节旋转速度。

操作简单，可以使用烧杯进行小容量试验。

接液部采用全不锈钢材质，耐腐蚀性好、并且卫生。

操作简单，可以更换搅拌叶片（低粘度均质搅拌机、高粘度均质搅拌机、分散式搅拌机、旋风式搅拌机）。

可以利用定时器功能，设置时间实现自动停止。

规格

■ LR-1F

电机(W)	360(AC100V)
旋转速度(r/min)	500 ~ 10000
处理量(L)	0.2 ~ 3
高度(mm)	470 ~ 630


■ LR-2C

电机(W)	480(AC100V)
旋转速度(r/min)	500 ~ 10000
处理量(L)	1 ~ 20
高度(mm)	640 ~ 1070

■ 气动马达规格 LR-2

电机(W)	气动马达 400
旋转速度(r/min)	300 ~ 6000
处理量(L)	1 ~ 10
高度(mm)	660 ~ 1000

桨叶的形态

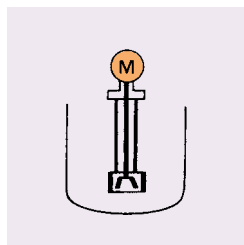

上部均质搅拌机